

# CONTINENTAL PLASTIC

CATÁLOGO de PRODUCTOS



*en Español*



To Order: 877.728.4911 or 262.728.4800  
[www.continentalplastic.com](http://www.continentalplastic.com)



Continental Plastic Corp. es líder en la fabricación de equipos veterinarios y de inseminación para la industria de la inseminación artificial. Los productos para uso en la industria alimenticia y sanidad son también un aspecto importante de nuestro negocio. Podemos ofrecer precios muy competitivos, ya que la mayoría de los productos son fabricados en nuestras instalaciones en Delavan, Wisconsin, en los Estados Unidos. Creemos que el precio, calidad y servicio al cliente han sido nuestras claves de éxito y crecimiento. Estamos comprometidos con nuestra misión y continuamente trabajamos para asegurar que nuestros clientes tengan acceso a los productos de la mejor calidad, pues nuestros clientes son una parte vital de nuestra organización. Todos sus comentarios, sugerencias o preguntas sobre nuestros productos o servicios son bienvenidos.

#### **POLÍTICA DE RETORNO DE PRODUCTOS**

Ninguna mercancía puede ser regresada a Continental Plastic Corp, sin que el cliente haya pedido y recibido previa aprobación. Todos los retornos de productos están sujetos a un 10% de cargo. Los privilegios de retorno e intercambio se otorgan bajo una solicitud, solo sobre productos en inventario y dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la factura.

#### **INFORMACIÓN DE ENVÍO**

Los pedidos se envían de la manera más económica y de acuerdo a las especificaciones de los clientes. L.A.B. Todos los pedidos son L.A.B Delavan, Wisconsin.

**RECIBO DE MERCANCÍA DA—ADA.** Los pedidos de Continental Plastic se surten con mercancía en buena condición y empacados cuidadosamente en nuestro departamento de envíos. Desafortunadamente, hay ocasiones cuando la mercancía se daña durante el transporte y llega en condición inaceptable. En estos casos, el servicio de envío es responsable por la entrega en buena condición y por daños. Por favor inspeccione todos los productos en cuanto los reciba y en caso de que haya una pérdida o daño, notifique a su servicio de envío tan pronto sea posible. Mantenga el empaque original ya que debe de ser inspeccionado por el servicio de envío antes de que se arregle el caso. Los reglamentos de ICC establecen que todos los reclamos por falta de producto o daño deben de ser arreglados en los 10 días después del envío o no serán cubiertos.

#### **TÉRMINOS DE PAGO**

Se aceptan efectivo, cheques, tarjetas de crédito, C.O.D. o crédito a 30 días bajo arreglo especial. Si desea abrir una cuenta con nosotros, por favor envíe su nombre, dirección, teléfono y número de fax junto con tres referencias de crédito (siendo una la de su banco) a nuestro departamento de crédito. Podemos darle una cuenta abierta y facturarle de esa manera. Un cargo por pago retrasado de 1.5% por mes sobre el saldo deudor se cargará a todas las cuentas con más de 30 días de cartera. Todas las cuentas con 60 días de cartera no tendrán envíos de pedido. La compañía no autoriza o garantiza el propósito, venta, concepción, calidad o productividad y ninguna otra garantía, oral o impresa, expresa o implícita. Los procedimientos y determinaciones son solamente recomendaciones y no deben de ser tomadas como garantías. La compañía, bajo ninguna circunstancia será responsable por daños especiales, indirectos o como consecuencia del uso de sus productos, sea basada en negligencia o sobre lo que se entiende como una garantía en un cargo mayor al precio de compra del producto sobre el cual se hace el reclamo.

## KNOT-A-BOOT™

Estas botas de polietileno claro son fáciles de poner y quitar sobre el zapato. Pueden usarse con o sin la práctica agujeta. Las botas deben de usarse una sola vez y ser descartadas para evitar contaminación no deseada de una área a otra. Hay opciones de embalaje y colores disponibles con pedido especial, por favor pregunte.

### PEQUEÑA:

14" (35.56 cm) de alto. Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 8 (EEUU).

PRODUCTO	GROSOR	BOTAS CAJA	BOTAS CARTÓN	CAJAS POR TARIMA	COLOR
B6-1847	4 mil	100	1,000	40	Claro



PEQUEÑA

### ESTANDAR:

14.75" (37.47 cm) de alto, 18" (45.72 cm) de alto.

Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 10 (EEUU).

B6-1810	1.75 mil	100	1,000	40	Claro
B6-1830	3 mil	100	1,000	40	Claro
B6-1831	3 mil	100	1,000	40	Negro
B6-1850	4 mil	50	500	40	Claro
B6-1851	4 mil	50	500	40	Negro
B6-1870	6 mil	50	500	24	Claro
B6-1871	6 mil	50	500	24	Negro



ESTANDAR

### EXTRA GRANDE Y ALTA:

16" (40.60 cm) de largo, 21" (53.34 cm) de alto.

Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 12 (EEUU).

B6-1837	3 mil	100	1,000	24	Claro
B6-1857	4 mil	50	500	24	Claro
B6-1859	4 mil	50	500	24	Negro
B6-1877	6 mil	50	500	24	Claro
B6-1878	6 mil	50	500	24	Negro



EXTRA GRANDE Y ALTA

### JUMBO:

18.75" (47.44 cm) de largo, 21" (53.34 cm) de alto.

Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 16 (EEUU).

B6-1880	4 mil	50	500	24	Claro
---------	-------	----	-----	----	-------



JUMBO

### ELAST-A-BOOT®

Convenientes botas con elástico y con ligera textura. 17" (43.18 cm) de alto.

Cabe sobre zapatos de hombre hasta de talla 12 (EEUU).

B6-1930	4 mil	50	500	25	Azul
B6-1960	6 mil	50	500	25	Azul



ELAST-A-BOOT®

*Precaución: Pueden ser resbalosas en ciertas superficies. No use sobre la nieve o hielo.*

# GUANTES



CONTINENTAL®, SUPREME™

## COMPARE TAMAÑOS



# GUANTES DE PALPACION HASTA EL HOMBRO

Todos los guantes hasta el hombro están empacados 100 por caja, (B6-1306 en bolsa de plástico), 10 cajas por cartón, 48 cartones por tarima. Los guantes hasta el hombro desechables son fabricados de polietileno de alta calidad.

Todos los guantes B6 tienen tamaño de mano **GRANDE**.

Producto	Grosor	Longitud	Color	Características
B6-1010	1 mil	34" (86.36 cm)	Claro	Pulgar a 45°
B6-1000	1.25 mil	34" (86.36 cm)	Claro	Pulgar a 45°
B6-1306	1.25 mil	39" (99.06 cm)	Café	Pulgar a 45°
B6-1020	1.75 mil	34" (86.36 cm)	Claro	Pulgar a 45°

## GUANTES CONTINENTAL®, SUPREME™

Un nuevo tipo de guante para palpación – con menos de 1 mil de grosor, el Supreme™ es durable y fuerte; al mismo tiempo, permite al usuario un tacto excepcional.

B6-1100	1 mil	34" (86.36cm)	Morado	45° thumb
---------	-------	---------------	--------	-----------

V7-1312	1 mil	34½" (88.26 cm)	Azul claro	Pulgar a 90° Mano <b>PEQUEÑA</b>
V7-1320	1.25 mil	35" (88.55 cm)	Claro	Pulgar a 90° Mano <b>PEQUEÑA</b>
V8-1010	1 mil	36½" (92.71 cm)	Claro	Pulgar a 90° Mano <b>GRANDE</b>
V8-1008	1.25 mil	36½" (92.71 cm)	Anaranjado	Pulgar a 90° Mano <b>GRANDE</b>
V8-1020	1.25 mil	36½" (92.71 cm)	Claro	Pulgar a 90° Mano <b>GRANDE</b>

## SUPERSENSITIVE™

Guante azul, hasta el hombro, fabricado de polietileno suave de alta calidad. Este material proporciona sensibilidad táctil excepcional, así como la fuerza suficiente para estirarse sin romperse.

B6-1200	1.25 mil	34" (86.36 cm)	Azul Oscuro	Pulgar a 45° Mano <b>GRANDE</b>
B6-1400	1.25 mil	39" (99.06 cm)	Azul Oscuro	Pulgar a 45° Mano <b>GRANDE</b>
V7-2312	1.25 mil	34¾" (88.25 cm)	Azul Oscuro	Pulgar a 90° Mano <b>PEQUEÑA</b>
V8-1220	1.25 mil	36½" (92.71 cm)	Azul Oscuro	Pulgar a 90° Mano <b>GRANDE</b>

## GUANTE DE MUÑECA DE POLIETILENO

Guantes de polietileno de 1.25 mil de grosor que proporcionan protección y cobertura. Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 64 cartones por tarima.

B2-1260	Mediano	Sin textura	Sin talco
B2-1360	Grande	Sin textura	Sin talco

## GUANTE DE POLIETILENO HASTA EL CODO

Un guante sanitario, desechable, de 20" (50.80 cm) de largo fabricado de polietileno claro, de 1.25 mil grosor, de alta calidad. El guante es lo suficientemente grueso para dar buena resistencia sin sacrificar la maniobrabilidad.

Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 64 cartones por tarima.

B2-1230	Mediano	Sin textura	Sin talco
B2-1250	Grande	Sin textura	Sin talco

## GUANTES DE NITRILO DE ALTA CALIDAD CON TALCO

Los guantes azules de nitrilo están hechos de durable nitrilo de alta calidad. Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 70 cartones por tarima.

### Totalmente texturizado, con talco

B2-4385	Pequeño
B2-4395	Mediano
B2-4400	Grande
B2-4405	X Grande
B2-4410	XX Grande



## GUANTE DE NITRILO ECONOMICO, CON TALCO

Un guante azul de nitrilo, de precio económico y fácil de ponerse. Vienen 00 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 70 cartones por tarima.

### Totalmente texturizado, con talco

B2-3385	Pequeño
B2-3395	Mediano
B2-3400	Grande
B2-3405	X Grande

## VINILO

Guantes de vinilo, sin talco, de alta calidad, durables, disponibles con o sin textura. Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón, 70 cartones por tarima.

### Totalmente texturizado, sin talco

B2-1437	Mediano
B2-1440	Grande
B2-1445	X Grande
B2-1450	X X Grande



## GUANTES LATEX HASTA LA MUÑECA

Guantes de látex industrial, están disponibles con talco y sin talco. Con una presentación de 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón y 70 cartones por tarima.

### Totalmente texturizado, con talco

B2-1505	Pequeño
B2-1510	Mediano
B2-1515	Grande
B2-1520	X Grande

## GUANTES

## GUANTES DE NITRILO, SIN TALCO

Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón y 70 cartones por tarima.

### Totalmente texturizado, sin talco

B2-4420	Mediano
B2-4425	Largo
B2-4430	X Largo

## GUANTES NEGROS DE NITRILO, SIN TALCO

Los guantes están hechos de una calidad superior, de nitrilo durable, vienen Vienen 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón y 70 cartones por tarima.

### Totalmente texturizado, sin talco

B2-4520	Mediano
B2-4525	Largo
B2-4530	X Largo
B2-4535	XX Largo



## GUANTES LATEX, SIN TALCO

### Totalmente texturizado, sin talco

Vienen 100 guantes por caja dispensadora

B2-1523	Pequeño
B2-1525	Mediano
B2-1530	Largo

# BOVINO

## FORROS Y CONOS PARA VAGINA ARTIFICIAL

Los conos y los forros no desechables están fabricados de hule de látex de alta calidad y envueltos individualmente. Vendidos individualmente.



- B2-7100 Cono de punta ligera, 12.25" (31.11 cm) de largo
- B2-7110 Cono de punta gruesa, 12.25" (31.11 cm) de largo
- B2-7130 Forro combinado liso, 26" (66.04 cm) de largo, 2.75" (6.99 cm) de ancho
- B2-7125 Forro áspero, 26" (66.04cm) de largo, 2.75" (6.99 cm) de ancho
- B2-7115 Cono de punta gruesa, con apertura, 12.25" (31.11 cm) de largo
- B2-7000 Cono de plástico estándar, claro, desechable, con punta - polietileno de 3 mil, 11" (27.94 cm) de largo, 100 por caja dispensadora, 10 cajas por cartón.
- B2-7010 Extremo final del cono es estéril y desechable - 3 mil - polietileno Claro, de 20" (50.80 cm) de largo, 20 por paquete, 100 paquetes por caja
- B2-7005 Cono de punta desechable - 11" (27.97 cm) de largo, 100 por caja dispensadora, 10 cajas por cartón.

## FORRO EXTERNO PARA VAGINA ARTIFICIAL

Forro externo de vinilo, aislado para mantener un ambiente caliente para el cono de la vagina artificial y el tubo de colección. Fabricado con un cierre del largo total del abrigo, abrazadera de velcro y de vinilo para fácil limpiado.

- B2-7205 17.25" (45.08 cm) de largo

## DILUYENTES CONCENTRADOS

Diluyente en un paso, ONE-STEP™: Para semen de bovino y caprino. Es una solución concentrada de agua destilada, estéril, con buffer tipo tris, ácido cítrico, fructosa y glicerol. Deben de agregarse agua y yema de huevo antes de añadir el semen. Todo el contenido combinado producirá 1,000 ml de diluyente. Vendido individualmente, 20 por caja.

- B2-7400 Diluyente en un paso, ONE-STEP™



Diluyente en dos pasos, TWO-STEP™: Un diluyente aprobado por CSS para la dilución en dos pasos de semen de bovino y caprino. Se venden dos botellas de soluciones concentradas de agua destilada, estéril, con buffer tipo tris, ácido cítrico y fructosa. Una botella también contiene glicerol. Agua y yema de huevo deben de añadirse antes de agregar el semen. Todo el contenido, combinado produce 1,000 ml de diluyente.

Vendido individualmente, 20 por caja

- B2-7500 Diluyente en dos pasos, TWO-STEP™ *Incluye un frasco de antibiótico*
- B2-7505 Solo antibióticos – tartrato de tilosina, sulfato de gentamicina, lincomicina y espectinomicina. Cuando se combinan con semen crudo y diluyente (1 frasco para el diluyente TWO-STEP™ o 2 frascos para el ONE-STEP™), se produce un diluyente aprobado por CSS.

## KIT PARA TRICOMONIASIS BOVINA

Kit estéril para obtener muestras prepuciales de toros. El kit se puede también utilizar para tomar muestras del tracto reproductivo de hembras. Envuelto individualmente en una bolsa y esterilizado.

- B8-6575 Kit para Tricomoniasis completo, con catéter de colección de 28" (71.12 cm), con diámetro exterior de 0.196" (0.497 cm) y ensamblado con un tubo protector de 19" (48.26 cm)
- B8-6675 Kit para Tricomoniasis completo, con catéter de colección de 28" (71.12 cm), con diámetro exterior de 0.215" (0.546 cm) y ensamblado con un tubo protector de 19" (48.26 cm)
- B8-6677 Bulbo de hule solamente



## KIT DE TRICOMONIASIS TRICHIT™

Desarrollado por un veterinario especializado en el protocolo de salud del toro, el Trichit™ está diseñado para mejorar la capacidad de colección. Con una tapa patentada proporciona una superficie de raspado más robusto en comparación con el método tradicional del tubo de infusión. Con un agujero de perforación transversal debajo de la tapa, este diseño único permite que las muestras sean fácilmente estiradas en el tubo cuando se aplica presión negativa con la jeringa. El tapa blanca es más flexible que la versión negra, creando una superficie de raspado más suave.

- B8-6725 Tapa negra, tubo perforado de 21" (53.35 cm)
- B8-6735 Tapa blanca, tubo perforado de 21"
- B8-6730 Tapa negra, tubo con adaptador de 21"
- B8-6740 Tapa blanca, tubo con adaptador de 21"



## PROTECTOR DE FUNDAS, SHEATH PROTECTOR™

Muy popular para la protección sanitaria de la funda durante su uso.

El tubo y su tapa de hule previenen la transferencia de contaminantes al útero durante la inseminación o la transferencia de embriones ya que la funda no entra en contacto con material afuera del animal. Su punta en embudo lo hace fácil de tomar con una mano durante la inseminación. Patentes en proceso.

Vienen 25 por bolsa, 40 bolsas por caja, 48 cajas por tarima

B6-4700 12" (30.48 cm) Protector de fundas



## SANI-SHIELD PROTECTOR™

¡Doble protección! El SANI-SHIELD PROTECTOR™ estéril es usado como cubierta protectora para pistolas de inseminación completamente armadas. La funda mantiene el protector estéril hasta su uso. Patentes: #4,457,313 y #1,185,491.

## DIÁMETRO PEQUEÑO – USE CON PISTOLAS Y FUNDAS

Diámetro interior 0.212" (0.538 cm), diámetro exterior 0.255" (0.647 cm).

Para uso con las siguientes pistolas de inseminación: B6-3260 y B6-3460.

Envuelto individualmente. Vienen 25 por bolsa, 40 bolsas por caja.

B7-4525 8" (20.32 cm) - Claro

B7-4625 10" (25.40 cm) - Claro- Pedido especial solamente

B7-4725 12" (30.48 cm) - Claro



## DIÁMETRO GRANDE – USE CON TUBOS DE INFUSION

Diámetro interior 0.240" (0.610cm), diámetro exterior 0.300" (0.762cm).

Para uso con las siguientes pistolas de inseminación: B6-3650 y los tubos de infusión: B8-5100, B8-5200, B8-5120, B8-5220, B8-5130, B8-5230.

Envuelto individualmente. Vienen 25 por bolsa, 40 bolsas por caja.

B6-4450 6.50" (16.51 cm) Azul – Pedido especial solamente

B6-4550 8" (20.32 cm) Azul – Pedido especial solamente

B6-4650 10" (25.40cm) Azul – Pedido especial solamente

B6-4750 12" (30.48 cm) Azul

B6-4850 15" (38.10 cm) Azul – Pedido especial solamente

## COVERALLS™

Protección sanitaria en forma de una bolsa. Desenrolle una bolsa, deslice la funda y la pistola dentro, a continuación, empuje la funda y la pistola dentro de la vaca. COVERALLS™ mantendrá su funda y pistola limpias en su procedimiento sanitario. Con una presentación de 80 bolsas por rollo, 70 rollos por caja y 4 cajas por caja master.

B6- 4725 COVERALLS™ de 21" (53.34 cm), 80 bolsas en un rollo.





B6-4405, B6-4505

## FUNDAS DE INSEMINACIÓN

50 fundas por bolsa, 20 bolsas por caja = 1.000 fundas por caja, 96 cajas por tarima.  
También disponible en cajas master, 10 cajas de 1.000 fundas por caja master.

## FUNDAS CON INSERTO TWIN-TAPERED™

Funda de PVC diseñado con un inserto que proporciona un asiento seguro para la pajueta de inseminación y se puede utilizar tanto para pajuelas de 0.50 ml y 0.25 ml. Las dimensiones son 17.50" (44.45 cm) de largo, 0.178" (0.452 cm) de diámetro exterior. El color del inserto indica que pistola debe ser utilizada con cada funda:

- **Todas las fundas con inserto verde que tienen hendidura - pueden ser usadas con la pistola de inseminación estilo "O" Ring o de anillo.**
- **Todas las fundas con inserto azul que no tienen hendidura - pueden ser usadas con la pistola de inseminación estilo Barb o de lengüeta.**

B6-4405 Funda con inserto verde, con hendidura, inserto con posición normal.

B6-4505 Funda con inserto azul, sin hendidura, inserto con posición normal.



B6-4420



B6-4520

## FUNDAS CON INSERTO EMPUJADO

B6-4420 Funda con inserto verde, con hendidura y con inserto empujado hasta extremo cónico de la funda.

B6-4520 Funda con inserto azul, sin hendidura y con inserto empujado hasta extremo cónico de la funda.

## FUNDA DE 0.50 ML, CON HENDIDURA - SIN INSERTO

Diseñadas para usarse con la pistola de inseminación B6-3260 y con pajuelas de 0.50 ml con tapón de fieltro y polvo.

Esta funda no tiene ningún inserto, ya que es para uso exclusivo con la pajueta del 0.50 ml. Es de 17.50" (44,45 cm) de largo y 0.167" (0.424 cm) de diámetro exterior.

B6-4205 Sin inserto, con hendidura.

## SANI-PAK™ SHEATH

Estas fundas están empaçadas individualmente y envueltas en una manga de plástico suave y puede usarse como un dispositivo de inseminación doblemente protegido para minimizar la contaminación intrauterina.

B6-4210 Empacadas individualmente, use con B6-4205 funda sin inserto, con hendidura.

B6-4410 Empacadas individualmente, use con B6-4405 funda con hendidura e inserto verde

B6-4510 Empacadas individualmente, use con B6-4505 funda sin hendidura e inserto azul

B6-4425 Empacadas individualmente, use con B6-4420 funda con inserto empujado y de color verde

B6-4525 Empacadas individualmente, use con B6-4520 funda con inserto empujado y de color azul



B6-4210



## PISTOLA DE INSEMINACION ALL-2-MATE®

Es la pistola para inseminación más versátil del mercado. No hay necesidad de cambiar puntas o usar adaptadores, esta pistola puede usarse con pajuelas de 0.50 ml y 0.25 ml con facilidad. También debe usarse con la funda TWIN-TAPERED™ de 17.50" (44.45 cm) de longitud. Las pistolas se venden individualmente, empaquetados en un tubo de plástico protector.

Pregunte como obtener el logotipo de su empresa grabado en el botón del pistón. Todas las pistolas CONTINENTAL™ vienen con anillos de identificación de colores, como se muestra en la foto a la derecha.

B6-3260 Pistola "O" Ring, con anillo de identificación de color.

**Use con la funda de inserto verde.**

B6-3460 Pistola estilo Lengüeta o Barb Style, con anillo de identificación de color.

**Use con la funda de inserto azul.**

B6-0325 Pistón ALL-2-MATE®

Solamente el pistón con el logo de CONTINENTAL™



## PISTONES NUMERADOS

Los pistones de las pistolas ALL-2-MATE® están disponibles grabados con números del 1 al 10, grabados con ácido, los números nunca desaparecerán.

Se venden en juegos del 1 al 5 y del 6 al 10.

B6-3260NUM Juego de pistolas ALL-2-MATE® "O" Ring  
Con pistones enumerados del 1-5

B6-3260NUM2 Juego de pistolas ALL-2-MATE® "O" Ring  
Con pistones enumerados del 6-10

B6-3460NUM Juego de pistolas ALL-2-MATE® Barb Style  
Con pistones enumerados del 1-5

B6-3460NUM2 Juego de pistolas ALL-2-MATE® Barb Style  
Con pistones enumerados del 6-10



## PISTOLA CALENTADORA

Regular la temperatura de su pistola para inseminación artificial. Este práctico dispositivo que funciona con batería.

B6-3005 Pistola calentadora



## "O" RINGS

Para uso con las pistolas de inseminación bovinas B6-3260, así como para la pistola de inseminación caprina G6-3250. Múltiples colores disponibles para fácil identificación.

Vendidos en paquetes de 10. Un color por paquete.

B6-3275	Negro	B6-3281	Café
B6-3276	Amarillo	B6-3282	Verde
B6-3277	Rojo	B6-3283	Azul
B6-3278	Beige	B6-3284	Gris
B6-3279	Rosa	B6-3285	Azul claro
B6-3280	Anaranjado		



## LLENADORA PARA ESPERMA DE AVES

Las llenadoras CONTINENTAL® son reconocidas por los productores de aves profesionales como las máquinas más confiables en el mercado. Estos equipos utilizan corriente de 110 voltios, 60 ciclos de corriente; pero también pueden funcionar con corriente de 220 voltios, 50 ciclos de corriente con pedido especial.



## LLENADORAS DE PAJUELAS MULTI-SHOT™ Y SINGLE-SHOT™

Máquina de velocidad variable que prepara pajuelas de manera continua a la velocidad determinada por el operador (hasta 1500 pajuelas por hora). La dosis máxima es de 1/15 ml con la jeringa de 6 ml o de 1/10 ml con la jeringa de 12 ml. Las pajuelas son precalentadas con aire caliente y se mantienen a la temperatura ideal para mantener la viabilidad del semen. Las pajuelas precalentadas operan automáticamente a través de la máquina, son contadas, llenadas y finalmente distribuidas en las bandejas de recepción para que el operador las manipule.

P4-7700 Llenadora de Pajuelas Multi Shot™


P4-7600 Llenadora de pajuelas Single Shot™ - Es una máquina que funciona de manera intermitente y tiene una velocidad única. Llena una pajuela y se detiene, esperando que el operador tome la pajuela llena para proceder a llenar la siguiente. Todas las otras características son similares a la llenadora Multi Shot™



## DISPENSADOR NEUMÁTICO DE SEMEN

El dispensador de semen está regulado por aire, puede sumergirse completamente en agua para su limpieza, llena hasta 1600 pajuelas por hora, esta máquina solo pesa 31 libras, es portátil y puede usarse en cualquier lugar con un compresor o tanque de aire portátiles (estos no están incluidos con el dispensador). Esta versión mejorada, se caracteriza por tener el ensamblado de operación de CONTINENTAL®, que ofrece mayor precisión y menos mantenimiento. La dosis máxima es de 1/15 ml con la jeringa de 6 ml o de 1/10 ml con la jeringa de 12 ml.

P4-7800 Dispensador neumático de semen.

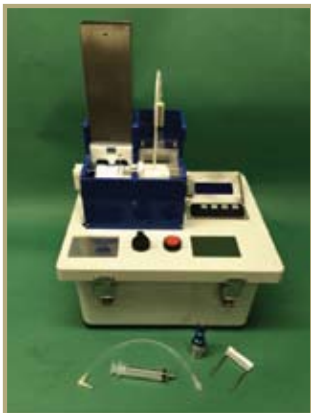

## MINI LLENADOR DE PAJUELAS

El mini llenador de pajuelas es la más reciente incorporación de Continental a su línea excepcional de máquinas de llenado. La mini llenadora tiene una carcasa exterior de fibra de vidrio, cuenta con un diseño resistente y fácil de limpiar. La cabeza se separa de la base y es totalmente sumergible para el saneamiento completo.

P4-7900 Mini llenador de pajuelas, incluye el disparador para mini pajuelas

P4-7910 Tubo adicional para el mini llenador de pajuelas, se vende en paquetes de 50 tubos.



## DISPARADORES

P6-7260 Disparador para Mini pajuelas, en la foto con el Mini llenador de pajuelas.

P6-7250 Disparador para tubo estándar de estireno, con un diámetro exterior de 5 mm

P6-7255 Disparador para tubo pequeño de estireno con un diámetro exterior de 4mm

## EXPULSADOR

Este aparato de mano expulsa una cantidad determinada de aire cuando se aprieta el bulbo de hule, expulsando el semen que se encuentra dentro de la pajuela, este expulsador permite al técnico controlar la presión de aire durante la inseminación.

P6-7200 Expulsador de mano para usar con un tubo de diámetro exterior estándar.

P6-7202 Expulsador de mano para usar con un tubo de diámetro exterior pequeño.

## ASPIRADOR

Colecte, aspire y diluya directamente con la jeringa. Cuando se llene, vacíe la jeringa en la llenadora de pajuelas o mantener hasta que esté listo para inseminar. Es conveniente y totalmente desechable. Los kits son empacados individualmente y esterilizados.

P2-7100 Kit aspirador de 12 ml.

P2-7101 Kit aspirador de 6 ml.


P2-7020 Juego de tubos aspiradores (P2-7000 y P2-7010)

P2-7000 Tubo aspirador largo, doblado de 5" (12.70 cm), 100 por bolsa.

P2-7010 Tubo aspirador corto, doblado de 4" (10.16 cm), 100 por bolsa.

P2-7104 Tapón de hule de 12 ml, 50 por bolsa.

P2-7102 Tapón de hule de 6 ml, 100 por bolsa.

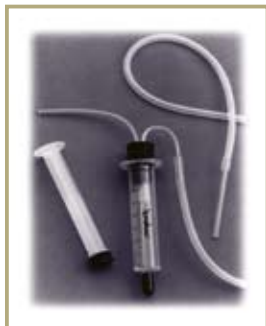

## DILUYENTE PARA SEMEN DE AVE

El diluyente para semen de aves, Beltsville Poultry Semen Extender II, contiene gentamicina y mantiene una fertilidad aceptable del esperma hasta por seis horas cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones. La temperatura del diluyente debe de ser de 68° F a 77° F (20° C a 25° C) antes de ser mezclado con el semen. La dilución recomendada es 1 a 1.

## DILUYENTE PARA PAVOS

Frascos de Nalgene: Se vende individualmente

P2-7450 Frasco de 50 ml, 50 por caja

P2-7520 Frasco de 125 ml, 25 por caja

Ampollas de vidrio: se venden 100 por caja, 8 cajas por cartón

P2-7425 Ampolla de 10.0 ml

P2-7475 Ampolla de 5.0 ml

P2-7375 Ampolla de 2.5 ml

## DILUYENTE PARA GALLO

Ampollas de vidrio:

100 por caja, 8 cajas por cartón

P2-7200 Ampolla de 2.5 ml.

P2-7225 Ampolla de 5.0 ml

P2-7240 Frasco de 50 ml, 50 por caja

## DILUYENTE PARA PATO

Haga su pedido de diluyente para pato con 12-16 semanas de anticipación. Ampollas de vidrio:

100 por caja, 8 cajas por cartón.

P2-7250 Ampolla de 2.5 ml



50 ml & 125 ml




2.5 ml, 5.0 ml, 10.0 ml

## PAJUELAS PARA AVES DE DIÁMETRO EXTERIOR ESTÁNDAR

Pajuelas lisas de estireno de 4.0625" (10.3 cm) de longitud con un diámetro exterior de 0.196" (5mm). Las pajuelas están disponibles con un diámetro interno de 0.082" (0.208 cm). Vienen 100 pajuelas por bolsa, 10,000 por caja y 500,000 por tarima.

P6-5582 Pajuelas con 0.082" (0.208 cm) de diámetro interno, orden mínima de 10 bolsas (1,000 pajuelas).

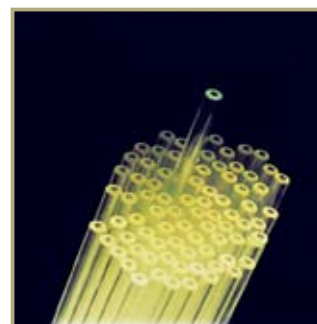

P6-5582

## PAJUELAS PARA AVES DE DIÁMETRO EXTERIOR PEQUEÑO

De la misma longitud y diámetro interno que las pajuelas de diámetro exterior estándar, pero el diámetro externo se redujo en un 18.3%, es decir 0.160" (4 mm). Esto reduce el espacio de almacén y gastos de envío. Vienen 100 pajuelas por bolsa, 10,000 por caja y 480,000 por tarima.

P6-6082 Pajuelas con 0.082" (0.208 cm) de diámetro interno, orden mínima de 10 bolsas (1,000 pajuelas)

## MINI PAJUELAS PARA AVES

Nuevas y mejoradas mini pajuelas para la inseminación de aves. Fabricadas de plástico azul claro de alta calidad, con pared delgada, cuerpo transparente y flexible. Ambas puntas de la pajuela están dobladas hacia dentro para minimizar lesiones y cualquier pérdida de semen durante la manipulación. La pajuela es 2.75" (7.0 cm) de largo con un diámetro exterior de 0.112" (0,284 cm) y un diámetro interior de 0.098" (0.248 cm). Con costos económicos de envío, vienen 1,000 pajuelas por bolsa de polietileno, 100,000 por caja y 2,200,000 por tarima.

P6-5400 Mini pajuelas para aves



P6-5400

## DILUYENTE UNIVERSAL PARA SEMEN DE EQUINO, NEXT GENERATION®

El azúcar y la leche en polvo libre de grasa, conforman el diluyente universal para equino NEXT GENERATION® el mismo que se recomienda para la inseminación artificial. El semen puede ser enfriado por periodos prolongados para su almacenamiento o para su transporte. También puede usarse el mismo día en la granja con o sin antibióticos. Cada kit contiene componentes que cuando son mezclados producen a 150 ml de diluyente. La botella incluye un especial sello de aluminio anti-derrames. Se venden en paquetes de 10.



### SIN ANTIBIOTICO:

E6-7020 Dosis de 150 ml – Incluye agua y componentes secos

### CON AMICACINA Y PENICILINA-K:

E6-7022 Dosis de 150 ml – Incluye agua y componentes secos

## DILUYENTE PARA SEMEN EQUINO DEL DR. KENNEY

### SIN ANTIBIOTICO:

E6-7200 Dosis de 150 ml – Incluye agua y componentes secos

### CON AMICACINA Y PENICILINA-K:

E6-7222 Dosis de 150 ml – Incluye agua y componentes secos



## CAJA PARA EL TRANSPORTE DE SEMEN, EQUINE EXPRESS II™

Es una caja que está lista y es fácil de usar para el transporte de semen equino. Dentro de una caja de cartón de transporte se encuentra un contenedor de espuma, donde se puede colocar hasta 120 ml de semen diluido y un bloque de enfriamiento. USDA-APHIS aprobó esta caja para el transporte internacional. No necesita de seguimiento de contenedores o depósito. Valor agregado por tarifas de envío con Federal Express y UPS.

Se venden individualmente, 6 unidades por caja.

E8-9000 Incluye dos jeringas de plástico estériles y un bloque de enfriamiento.

## HISOPOS PARA CULTIVO

Una herramienta única para tomar muestras uterinas de yeguas para cultivo.  
El diseño en 3 piezas incluye:

- 1) Un tubo exterior de PVC claro
- 2) Una funda de PVC azul cubriendo el hisopo
- 3) Un soporte de PVC blanco con un hisopo de poliestireno con algodón.

Completamente armado mide 29.50" (74.93 cm), con diámetro exterior de 0.300" (0.762 cm). Esta combinación permite que las muestras sean tomadas de manera sencilla y sanitaria. Después de la colección, las muestras pueden guardarse y transportarse de manera segura en su propia cápsula protectora. Patente #4,586,604. Otros patentes pendientes.

- E9-5200 Estéril, empacada individualmente  
25 por bolsa, 10 bolsas por caja
- E9-5215 No estéril  
25 por bolsa, 20 bolsas por caja



HISOPOS PARA CULTIVO


## PIPETA DE INFUSION EQUINA, EQUINE INFUSETTE®

Estas pipetas están diseñadas específicamente para uso con los productos de infusión uterina comunes. Incluye adaptador azul.

Fabricado de PVC con un diámetro interno de 0.130" (0.330 cm), 0.196" (0.497 cm) de diámetro exterior.

25 por bolsa, 40 bolsas por caja

- E6-5310 No estériles, 22" (55.88 cm) de largo
- E6-5315 Estériles, 22" (55.88 cm) de largo, empacadas individualmente
- E6-5410 No estériles, 25" (63.50 cm) de largo
- E6-5415 Estériles, 25" (63.50 cm) de largo, empacadas individualmente

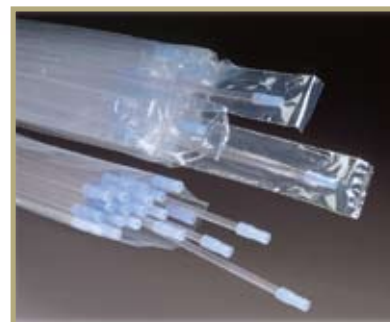

EQUINE INFUSETTE®

## FORROS PARA VAGINA ARTIFICIAL EQUINA – DESECHABLES

Fabricados de polietileno azul, suave, de alta calidad.

- E8-7000 Tipo Missouri, 1.25 mil, 36" (91.44 cm) de largo  
100 por bolsa, 10 bolsas por caja
- E8-8050 Tipo Colorado, extra largo, 1.50 - 2 mil, 37.50" de largo  
50 por bolsa, 10 bolsas por caja





## PISTOLA DE INSEMINACIÓN PARA CAPRINOS ALL-2-MATE®

Es la pistola para inseminación más versátil del mercado. No hay necesidad de cambiar puntas o usar adaptadores, esta pistola funciona fácil con las pajuelas de 0.50 ml y 0.25 ml.

Para usar con las fundas G6-4200 o G6-4400.

G6-3250 Pistola de inseminación para caprinos ALL-2-MATE®, de 12" (30.48 cm) de largo



## FUNDA PARA CAPRINO SIN INSERTO

Funda de PVC sin inserto, para usarse con la pistola de inseminación para caprinos ALL-2-Mate® G6-3250 y la pajuela de 0.50 ml con tapón de fieltro y polvo.

Las dimensiones son 12.125" (30,79 cm) de largo; 0.167" (0,424 cm) de diámetro exterior.

Vienen 25 fundas por bolsa de polietileno y 80 bolsas por caja.

G6-4200 Funda para caprino de 0.50 ml con hendidura

## FUNDA PARA CAPRINO CON INSERTO

Funda de PVC con un inserto, para usarse con la pistola de inseminación para caprinos ALL-2-MATE® G6-3250 y la pajuela de 0.50 ml o de 0.25 ml con tapón de fieltro y polvo.

G6-4400 Funda para caprinos con inserto Twin-Tapered™

## DILUYENTES CONCENTRADOS

Diluyente en un paso, ONE-STEP™: Para semen de bovino y caprino.

Es una solución concentrada de agua destilada, estéril, con buffer tipo tris, ácido cítrico, fructosa y glicerol. Deben de agregarse agua y yema de huevo antes de añadir el semen. Todo el contenido combinado producirá 1,000 ml de diluyente. Vendido individualmente, 20 por caja.

B2-7400 Diluyente en un paso, ONE-STEP™



Diluyente en dos pasos, TWO-STEP™: Un diluyente aprobado por CSS para la dilución en dos pasos de semen de bovino y caprino. Se venden dos botellas de soluciones concentradas de agua destilada, estéril, con buffer tipo tris, ácido cítrico y fructosa. Una botella también contiene glicerol. Agua y yema de huevo deben de añadirse antes de agregar el semen. Todo el contenido, combinado produce 1,000 ml de diluyente.

Vendido individualmente, 20 por caja

B2-7500 Diluyente en dos pasos, TWO-STEP™ Incluye un frasco de antibiótico

B2-7505 Solo antibióticos – tartrato de tilosina, sulfato de gentamicina, lincomicina y espectinomicina. Cuando se combinan con semen crudo y diluyente (1 frasco para el diluyente TWO-STEP™ o 2 frascos para el ONE-STEP™), se produce un diluyente aprobado por CSS.

## TERMÓMETROS

Vendidos individualmente

- B6-6320 Fahrenheit, rango de 25° F a 125° F
- B6-6330 Celsius, rango de -5° C a 50° C
- B6-6340 Fahrenheit, rango de 25° F a 125° F sombreado de 91° F a 97° F
- B6-6350 De cristal, rango de 0° F a 220° F, -20° C a 110° C



## THERMOS®

De un peso ligero, de plástico, botella de boca ancha, con asa lateral moldeada y una capacidad de 671.30 ml. Con dimensiones de 4.50" (11.43 cm) de ancho, 8.0" (20.32 cm) de largo.

Se venden individualmente o 6 Thermos® por caja, 12 por caja master.

- B6 6210 Thermos® con doble pared/con revestimiento de vidrio vacío
- B6-6215 Reemplazo de revestimiento de vidrio para B6-6210

## THERMOS® CON REVESTIMIENTO DE VIDRIO, TERMÓMETRO Y SACA PAJUELAS

Se vende individualmente o 6 Thermos® por caja y 12 por caja master.

- B6-6260 Con doble pared/ revestido de vidrio vacío con termómetro Fahrenheit, rango de 25 °F a 125 °F
- B6-6270 Con doble pared/ revestido de vidrio vacío con termómetro Celsius, rango de -5° C a 50° C
- B6-6280 Con doble pared/ revestido de vidrio vacío con termómetro sombreado Fahrenheit sombreado, con rango de 25° F a 125° F sombreado de 91° F a 97° F



## KIT PARA INSEMINACIÓN CANINA

Este es un kit completo para la inseminación canina e incluye: Un cono de punta liviana, guantes hasta la muñeca (talla grande), el anillo verde u "O" ring, tubo de centrífuga de 15 ml, un paquete de una onza de lubricante profesional "Little Squirt™", un adaptador azul, una jeringa de 6 ml, un tubo de inseminación de 9" y otro de 4".

- C4-7101 Kit para inseminación canina, se vende individualmente o 100 kits por caja
- C6-4600 Tubo de inseminación de 9", 25 tubos por paquete (se vende sin necesidad de adaptadores)
- R6-4600 Tubo de inseminación de 6", 100 tubos por paquete (se vende sin necesidad de adaptadores)
- 01-0140 Adaptadores – 1,000 por bolsa



## DILUYENTE PARA SEMEN CANINO CONTINENTAL®

Tenemos dos variedades de diluyente para semen canino CONTINENTAL® que están disponibles para su uso con semen congelado. Es una solución concentrada y fortificada con yema de huevo para preservar el semen después de su colección.

Se venden en viales de 3 ml congelados. Todos los pedidos se entregan al día siguiente.

- C2-7500 Diluyente para semen canino - para semen congelado



# PAJUELAS BOVINO

## PAJUELAS CON TAPÓN DE FIELTRO Y POLVO – 0.50 ML

Las pajuelas son fabricadas a partir de materia virgen de alta calidad bajo estricto control de calidad. Las dimensiones de las pajuelas son de 5.25" (13.34 cm) de largo, 0.096" (0.243 cm) de diámetro interno, 0.111" (0.281 cm) de diámetro exterior. Empacadas en 1,000 pajuelas por bolsa y 10 bolsas por caja.

B4-2200 Pajuela de 0.50 ml con tapón y polvo

\*Claro, es el único color existente en inventario. Otros colores deben ser pedidos especialmente, con un mínimo de 100 paquetes.



## PAJUELAS CON TAPÓN DE FIELTRO Y POLVO – 0.25 ML

B4-2400 Pajuela de 0.50 ml con tapón y polvo

\*Claro, es el único color existente disponible.



B4-2400

## PAJUELAS SIN TAPÓN – 0.50 ML

(No se muestran) Pajuelas claras de PVC sin tapón. Dimensiones: 5.25" (13.33 cm) de largo, 0.096" (0.243 cm) de diámetro interior, 0.111" (0.281 cm) de diámetro exterior. Vienen 1,000 pajuelas por bolsa, 10 bolsas por caja.

B4-2222 Pajuela de 0.50 ml sin tapón

## POLVO PARA SELLAR

Para sellar las pajuelas con tapón de fieltro y polvo. No se muestra.

B4-1050 Polvo para sellar, 1 libra (0.45 kg) en bolsas de polietileno.

## MANGA HASTA EL HOMBRO

(No se muestra) Manga ancha, desechable, diseñada como un guante sin dedos sin pulgar. 1 mil, 30" (76.20 cm) de largo 9" (22.86 cm) de ancho

B6-1500 Manga hasta el hombro – disponible solo en color claro.



## TUBOS PARA CONGELAR SEMEN

Para el semen de verraco y semen equino. Fabricado de medición PVC virgen 10.25" (27.30 cm) de largo, 0.233" (0.591 cm) de diámetro exterior, 0.210" (0.53 cm) de diámetro interior, con 5 ml de capacidad.

Requiere de balines de plástico para sellarse.

Se venden 100 tubos por bolsa.

O8-9000 Tubo para congelar Semen

O8-9002 Balines de color natural

O8-9005 Balines de color verdes



## GOBLETS

Un proceso de extrusión única de polietileno de alta densidad refuerza la base del goblet, eliminando la posibilidad de que la parte inferior se caiga.  
Por favor, especifique el tamaño y color.

- 1) Goblet de 95 mm – Goblet para almacenar en volumen. De 5.50” (13.97 cm) de largo 3.50” (8.89 cm) de diámetro interior, 3.75” (9.53 cm) de diámetro exterior, con 800 pajuelas de 0.50 ml de capacidad.

B4-7410 Claro, solo orden especial con un mínimo de 300 goblets

- 2) Goblet de 12.3 mm, con 10 pajuelas de 0.50 ml de capacidad, 150 por bolsa, 40 bolsas por caja.

B4-7440 Claro

B4-7609 Amarillo

- 3) Goblet de 10 mm, con 5 pajuelas de 0.50 ml de capacidad, 200 por bolsa, 50 bolsas por caja.

B4-7430 Claro

B4-7430AQUA Azul Agua

B4-7430BLK Negro

B4-7430BLU Azul

B4-7430GRN verde

B4-7430ORG Anaranjado

B4-743PINK Rosado

B4-7430PUR Purpura

B4-7430Red Rojo

B4-7430YEL Amarillo

- 4) Goblet de 7.1 mm, con 5 pajuelas de 0.25 ml de capacidad, 200 por bolsa, 50 bolsas por caja.

B4-7530 Claro

B4-7530AQUA Azul Agua

B4-7530BLK Negro

B4-7530BLU Azul

B4-7530GRN verde

B4-7530ORG Anaranjado

B4-753PINK Rosado

B4-7530PUR Purpura

B4-7530Red Rojo

B4-7530YEL Amarillo



Goblets disponibles solo en colores claro, amarillo, y azul

## BASTONES

Los bastones y parrillas son de aluminio de alta calidad.

B4-7510 Bastón para goblets de 9.2 y 10 mm  
Capacidad = 2 goblets

B4-7550 Bastón para goblets de 12.3 y 13 mm  
Capacidad = 2 goblets



# LUBRICANTE



## LUBRICANTE PINNACLE™

El mejor gel lubricante, no espermicida, hidrosoluble aprobado para todos los tipos de procedimientos veterinarios, incluidos los procedimientos de inseminación artificial. PINNACLE™ cumple con las normas de fabricación estrictas para el pH y la osmolaridad y se ha demostrado que es no tóxico para las células de espermatozoides.

B6-6680 Tubos de 5 oz - 12 por caja, 6 cajas por envase



## LUBRICANTE PROFESSIONAL LUBE™

Gel lubricante de viscosidad ideal, no espermicida, esta envasado en tubos y botellas ovaladas con tapa "flip-top" de 8 oz (236.6 ml), en contenedores de un galón (3.75 litros) y en paquetes de una onza. Este lubricante minimiza la irritación de la piel y las mucosas. Es soluble en agua, no mancha, es inodoro y útil para la inseminación artificial, procedimientos rectales y ginecológicos.

B6-7020 Lubricante paquete de 1 oz, Little Squirt™, 275 por caja

B6-7000 Tubo - 8 onzas (236.6 ml), 12 por caja, 8 cajas por cartón

B6-7010 Un galón (3.7 litros) 4 por caja

B6-7040 Botella de 8 onzas (236.6 ml), 12 por caja, 8 cajas por cartón



## LUBRICANTE LIQUIDO CONTINENTAL®

Lubricante de alta calidad usado para exámenes de preñez y procedimientos ginecológicos. Para usarse sin diluir o diluido con agua.

Vendido individualmente, 12 tubos por caja.

B6-6600 Un cuarto de botella, 32 oz.



## BOTELLA DISPENSADORA DE PLASTICO

Botella de 8 onzas (236.58 ml) de polietileno con tapa fácil de quitar y tipo "flip-top". No se riega cuando el pico de la tapa se encuentra cerrado.

Ideal para lubricante, desinfectante, etc.

Vendido individualmente, 100 por caja

B6-6520 Botella de 8 onzas con tapa



## CAJA PARA DESCONGELAR

Caja de espuma de poliestireno diseñada para descongelar pajuelas.

Completamente sellada y durable para muchos años. Las dimensiones exteriores son 7.125" (18.09 cm) de largo, 5.125" (13.02 cm) de ancho, 5.125" (13.65 cm) de profundidad. El grosor de la pared es de 0.75" (1.90 cm).

Vendido individualmente

B6-6200 Caja para descongelado

## TUBOS DE INFUSIÓN ESTÁNDAR, INFUSETTE®

Tubos de PVC diseñados para uso con las soluciones uterinas disponibles en el mercado. Tienen puntas suaves y lisas. Las dimensiones son: 0.110" (0.279 cm) de diámetro interior, 0.196" (0.497 cm) de diámetro exterior. Se venden 25 por bolsa, 40 bolsas por caja.

\*B8-5125 y B8-5225 se empaican en 60 bolsas por caja.

\*\*B8-5831 se empaican en 20 bolsas por caja

B8-5100 18" (45.72 cm), no estériles

B8-5200 21" (53.34 cm), no estériles

B8-5205 25" (63.25 cm), no estériles

## TUBOS INFUSETTE® CON ADAPTORES

\*B8-5125 18" (45.72 cm) no estériles B8-5101 18" (45.72 cm) estériles

\*B8-5225 21" (53.34 cm) no estériles B8-5201 21" (53.34 cm) estériles

\*B8-5125 y B8-5225 son empacados en 60 bolsas por caja.



TUBOS INFUSETTE®  
CON ADAPTORES

## TUBOS DE INFUSIÓN PERFORADOS, INFUSETTE®

Este tubo de infusión está diseñado con el interior de su punta perforada para su fácil conexión con el pico de la jeringa, eliminando la necesidad del uso de adaptadores. Los tubos son fabricados de PVC y tienen puntas lisas, redondeadas. Con 0.110" (0.279 cm) de diámetro interno y 0.215" (0.546 cm) de diámetro externo.

Se empaican en 25 por bolsa, 40 bolsas por caja.

B8-5130 18" (45.72 cm) no estériles

B8-5230 21" (53.34 cm) no estériles

B8-5330 24" (60.96 cm) no estériles

B8-5830 28" (71.12 cm) no estériles

B8-5131 18" (45.72 cm) estériles, empacados individualmente

B8-5231 21" (53.34 cm) estériles, empacados individualmente

\*\*B8-5831 28" (71.12 cm) estériles, empacados individualmente



TUBOS DE INFUSIÓN  
PERFORADOS, INFUSETTE®

## TUBOS INFUSETTE® DE DIAMETRO INTERNO GRUESO

Tubos de 0.160" (0.406 cm) de diámetro interno, 0.225" (0.571 cm) de diámetro exterior para soluciones de alta viscosidad.

B8-5120 18" (45.72 cm) no estériles

B8-5220 21" (53.34 cm) no estériles

B8-5121 18" (45.72 cm) estériles, empacados individualmente

B8-5221 21" (53.34 cm) estériles, empacados individualmente

## ADAPTADORES

Convenientes adaptadores de 1.0" (2.54 cm), flexibles, de color azul claro, usados para conectarla punta de la jeringa a un tubo de infusión estándar. Vienen 1,000 por bolsa.

01-0140 Adaptadores


## ACCESORIOS



B6-6100, B6-6125



B6-6408, B6-6410

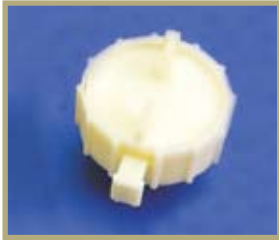

B6-6404



B6-6406



### TUBO PARA GUARDAR FUNDAS

Tubo de aluminio de peso liviano diseñado para guardar paquetes abiertos de fundas o tubos. Sellado fuertemente en cada lado con tapones de plástico removibles para prevenir contaminación.

Vendido individualmente, incluye los tapones.

B6-6100 Tubo para fundas, 18" (45.72 cm) de largo, 1.75" (5.08 cm) de diámetro.  
Para kits profesionales.

### TUBO PARA GUARDAR TUBOS

Tubo de aluminio de peso liviano diseñado para guardar paquetes abiertos de tubos. Sellado fuertemente en cada lado con tapones de plástico removibles para prevenir contaminación.

Vendido individualmente, incluye los tapones.

B6-6100 Para guardar tubos, 18" (45.72 cm) de largo, 1.75" (4.45 cm) de diámetro.

### PINZAS PARA PAJUELAS CITO

Pinzas de poliéster largas, de 6.50" (16.51 cm), diseñadas correctamente, para remover pajuelas y goblets fácil y rápidamente de sus contenedores. Diseñadas con punta acanalada que toma y rodea la pajuela sin dañarla. Protege sus manos durante el manejo del semen ya que el plástico transmite poco calor o frío.

Vendido individualmente, 25 por bolsa.

B6-6408 Para pajuelas de 0.50 ml

B6-6410 Para pajuelas de 0.25 ml

### CORTADOR DE PAJUELAS CITO

El cortador de pajuelas CITO está diseñado para cortar las puntas de las pajuelas rápidamente. Después de insertar la pajuela en el cortador, apriete el botón para cortarla a la longitud apropiada. Se desarma para limpieza y desinfección.

Fabricado de plástico no corrosivo con hoja de acero inoxidable.

Mide 2.25" (5.72 cm) en diámetro.

Vendido individualmente, 25 por bolsa.

B6-6404 Envuelto individualmente

### TIJERAS, SLIP 'N SNIP™

Convenientes tijeras que se doblan fácilmente, para cortar la punta sellada de las pajuelas.

Las hojas están fabricadas de acero inoxidable quirúrgico y mantienen su filo. Su tamaño las hace convenientes para cargar en el bolsillo o en el kit para inseminación. Separe las manijas y doble las tijeras en la posición de cortado; para cerrar, use el procedimiento inverso. Las dimensiones son 4.50" (11.43 cm) de largo abiertas, 4.125" (10.47 cm) de largo cerradas.

Vendidas individualmente, 25 por bolsa.

B6-6406 Tijeras SLIP 'N SNIP

### JERINGAS

La jeringa de plástico desechable está disponible en 6 ml y 12 ml para ser usada con las llenadoras de pajuelas CONTINENTAL®.

P6-6606 Jeringa de 6 ml, no estéril, 100 por paquete, 5 paquetes por caja

P6-6612 Jeringa de 12 ml, no estéril, 100 por paquete, 5 paquetes por caja

P6-6600 Tapones para jeringa, no estériles, 100 por bolsa

## GUANTES DE PALPACION HASTA EL HOMBRO

Todos los guantes hasta el hombro están empacados 100 por caja, (B6-1306 en bolsa de plástico), 10 cajas por cartón, 48 cartones por tarima. Los guantes hasta el hombro desechables son fabricados de polietileno de alta calidad.

Todos los guantes B6 tienen tamaño de mano **GRANDE**.

Producto	Grosor	Longitud	Color	Características
B6-1010	1 mil	34" (86.36 cm)	Claro	Pulgar a 45°
B6-1000	1.25 mil	34" (86.36 cm)	Claro	Pulgar a 45°
B6-1306	1.25 mil	39" (99.06 cm)	Café	Pulgar a 45°
B6-1020	1.75 mil	34" (86.36 cm)	Claro	Pulgar a 45°



### GUANTES CONTINENTAL®, SUPREME™

Un nuevo tipo de guante para palpación – con menos de 1 mil de grosor, el Supreme™ es durable y fuerte; al mismo tiempo, permite al usuario un tacto excepcional.

B6-1100	1 mil	34" (86.36cm)	Morado	45° thumb
---------	-------	---------------	--------	-----------

V7-1312	1 mil	34f" (88.26 cm)	Azul claro	Pulgar a 90° Mano <b>PEQUEÑA</b>
V7-1320	1.25 mil	35" (88.55 cm)	Claro	Pulgar a 90° Mano <b>PEQUEÑA</b>
V8-1010	1 mil	36½" (92.71 cm)	Claro	Pulgar a 90° Mano <b>GRANDE</b>
V8-1008	1.25 mil	36½" (92.71 cm)	Anaranjado	Pulgar a 90° Mano <b>GRANDE</b>
V8-1020	1.25 mil	36½" (92.71 cm)	Claro	Pulgar a 90° Mano <b>GRANDE</b>



B6-1100

### SUPERSENSITIVE™

Guante azul, hasta el hombro, fabricado de polietileno suave de alta calidad. Este material proporciona sensibilidad táctil excepcional, así como la fuerza suficiente para estirarse sin romperse.

B6-1200	1.25 mil	34" (86.36 cm)	Azul Oscuro	Pulgar a 45° Mano <b>GRANDE</b>
B6-1400	1.25 mil	39" (99.06 cm)	Azul Oscuro	Pulgar a 45° Mano <b>GRANDE</b>
V7-2312	1.25 mil	34¾" (88.25 cm)	Azul Oscuro	Pulgar a 90° Mano <b>PEQUEÑA</b>
V8-1220	1.25 mil	36½" (92.71 cm)	Azul Oscuro	Pulgar a 90° Mano <b>GRANDE</b>

### Compare Tamaños



B6 y V8 —  
Mano Grande

V7 —  
Mano pequeña

# PORCINO

## GUANTES DE PRE-COLECCION DE MUÑECA O HASTA EL CODO

Estos guantes pre-colección son ideales para la preparación del verraco, limpieza y evacuación del prepucio antes de la colección. Estos guantes se deslizan fácilmente sobre nuestro guante de colección de Vinilo Texturizado CONTINENTAL™ para luego ser removido rápida y fácilmente, dejando expuesto el guante de colección limpio, lo que ayudará a mantener una buena higiene y reducir el riesgo de contaminación. Hecho de 1.25 mil de grosor de polietileno.

Contiene 100 guantes por caja dispensadora, 10 cajas por cartón.

- B2-1230 Guantes de pre-colección – Hasta el Codo - Mediano
- B2-1250 Guantes de pre-colección – Hasta el Codo - Grande
- B2-1260 Guantes de pre-colección – Hasta la Muñeca - Mediano
- B2-1360 Guantes de pre-colección – Hasta la Muñeca – Grande



## CONTINENTAL™ GUANTE DE VINILO TEXTURIZADO, LIBRE DE TALCO

Es un guante de colección con “agarre antideslizante”, por lo que se han convertido rápidamente en el estándar de la industria. Ofrece un mejor agarre que los guantes lisos y son mucho más seguros para la colección que los guantes de nitrilo. Cada lote es analizado y verificado no espermicida.

- B2-1437 Continental Guante de Vinilo Texturizado – Libre de Talco – Mediano
- B2-1440 Continental Guante de Vinilo Texturizado – Libre de Talco – Grande
- B2-1445 Continental Guante de Vinilo Texturizado – Libre de Talco – X Grande
- B2-1450 Continental Guante de Vinilo Texturizado – Libre de Talco – XX Grande



## MANIQUÍ DE COLECCIÓN

De material duradero, de fácil ajuste de altura para una mejor colección y están disponibles en tres modelos diferentes que se adaptan a sus necesidades.

S6-0210 Maniquí de colección de acero inoxidable



## TAPETE DE COLECCIÓN DE CAUCHO

Proporciona una buena base para el cerdo durante la colección. Es grueso, resistente, fácil para mover y lavar. Con una medida de 3.0' x 4.0'.

S6-0220 Tapete de colección de caucho

## COPAS DE COLECCIÓN DE SEMEN

- S6-6310 Copa de colección reutilizable, con 1000 ml de capacidad  
 S6-6308 Copa de colección de styrofoam desechable, con 600 ml de capacidad-500/caja



S6-6310

## BOLSAS DE COLECCIÓN CON PERFORACIONES

Bolsas plásticas desechables, con perforación convencional, que permite desechar su parte superior junto al filtro ya usado durante la colección para un mejor control sanitario. Cada lote se prueba y se verifica como no espermicida. Tiene una medida de 71.12 cm de de largo y 24.13 cm de ancho, con una capacidad de 4 litros, tiene una presentación de 100 unidades por paquete y 10 paquetes/caja.

- S6-6515 Bolsas de colección con perforaciones



S6-6308

## FILTROS DE COLECCIÓN TIPO BOLSILLO

Filtro de flujo rápido, no espermicida, con excelente retención de gel. La forma de bolsillo del filtro hace que sea más fácil de usar que el filtro tradicional redondo. Basta con colocar el filtro sobre la copa de colección, empujar hacia abajo, asegurar con una liga de goma y quedará listo para colectar.

- S6-6560 Filtros tipo bolsillo 100/paquete

## FILTROS DE COLECCIÓN CIRCULARES NO TEJIDOS

Filtro de flujo rápido, con excelente retención de gel, cada lote es probado y verificado como no espermicida, con 200 unidades por paquete y 2000 paquetes por caja.

- S6-6529 Filtros circulares ultra flujo de 9"



S6-6310, S6-6560, S6-6529

## BANDAS DE GOMA

Estas bandas de gomas #32 son de la talla ideal para ser usadas con nuestras copas de colección y mantener la bolsa de colección y el filtro en su lugar.

Cada bolsa de 1 lb contiene entre 900-1000 bandas.

- S3-0050 Bandas de goma #32 bolsa de 1 lb.

## BOLSAS PARA "POOLING" (MEZCLADO) DE SEMEN


Bolsas de plástico desechables, fabricadas de polietileno de alta calidad. Ideales para el almacenado temporal de agua, diluyente, semen o para enviar semen empacado.

TRANSPARENTE - DE 3 MIL DE GRUESO

- S6-6525 8 litros, 14" de ancho x 22" de largo (35.56 cm x 55.88 cm)  
 500 por caja Para jarra o Baño María cilíndrico  
 S6-6527 12 litros, 16" de ancho x 22" de largo (40.64 cm x 55.88 cm)  
 500 por caja Para jarra grande o cubeta pequeña  
 S6-6528 18 litros, 24" de ancho x 24" de largo (60.96 cm x 60.96 cm)  
 250 por caja Ideal para cubetas de ~19 litros



BOLSAS - 8L, 12L & 18L

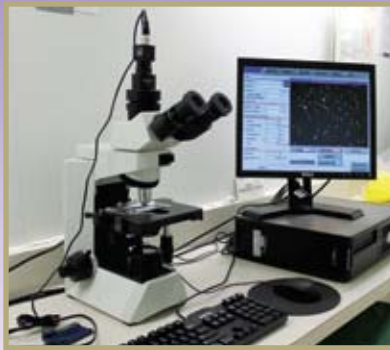

## SISTEMA CASA

El sistema CASA (Analizador de Semen con Asistencia Computarizada), provee un análisis preciso de la concentración, la motilidad, la motilidad progresiva, morfología y muchos otros parámetros de calidad del semen. El usuario puede optar por procesar sus dosis usando células totales, células móviles, células con motilidad progresiva, células morfológicamente normales o cualquier combinación de estos parámetros. Esto elimina el análisis tradicional subjetivo del técnico y se hacen dosis seminales más precisas y uniformes. Con este sistema el análisis es rápido, fácil de realizar y puede ser utilizado para múltiples especies.

## LÁMINAS CELLVISIÓN

Son una herramienta clave para los laboratorios que utilizan un sistema CASA. Son de alta calidad y excepcionalmente asequibles, ya que su configuración vertical u horizontal se ajustan perfectamente a sus necesidades. Se trata de láminas con cuatro cámaras de 20 micras cada una. Nuestro proceso de producción automatizada y patentada garantiza profundidades de cámaras precisas y reproducibles. Cada lámina en la línea de producción están marcadas con un interferómetro láser. Los portaobjetos se recubren especialmente para mejorar la motilidad, en comparación con las láminas competitivas. Cada lote es probado y verificado como no tóxico y están disponibles en configuraciones verticales y horizontales.



H



V

S6-1603 CellVision H 4-chamber, horizontal H  
 S6-1606 CellVision V 4-chamber, vertical V

## PLATINA CALENTADORA PARA MICROSCOPIO

Es ideal para verificar la motilidad del semen, esta Platina es diseñada específicamente para la fase de calentamiento y es adaptable a todas las marcas de microscopios estéreo y compuestos biológicos. La platina calentadora está hecha en aluminio de alta resistencia que mantiene una temperatura constante de  $\pm 1^\circ\text{C}$  un rango de ajuste de  $20^\circ\text{C}$  a  $50^\circ\text{C}$ . La etapa pre-calentamiento de toma de 1 a 2 minutos para alcanzar la temperatura constante deseada.



S3-1140

S3-1140 Platina calentadora para microscopio

## STEP UP™ SLIDE CALENTADOR EN GRADAS

El calentador de láminas en gradadas o Step Up™ Slide calentador, es de patente única y de diseño en pendiente, le ayuda a ahorrar espacio y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de su laboratorio. Puede calentar el doble de láminas que una unidad plana del mismo tamaño y también hace más fácil la manipulación de las láminas desde el final de la misma y no sobre una superficie plana. Tiene una capacidad de 40 láminas.



S3-1160

S3-1160 Step Up™ Slide calentador en gradadas

## CALENTADOR PLANO DE LÁMINAS

Este calentador es perfecto para el laboratorio de semen. Tienen una capacidad de 23 o 66 láminas, tiene una pantalla LED de temperatura, son ajustables a temperatura ambiente hasta  $70^\circ\text{C}$ , proporcionando calor uniforme a través de toda la superficie de calentamiento. Disponible en 220v.



S3-1150 o S3-1155

S3-1150 Calentador plano de láminas, 25.0" x 8.0", (64cm x 20cm), con capacidad de 66 láminas

S3-1155 Calentador plano de láminas, 10.25" x 7.0", (26cm x 18cm), con capacidad de 23 láminas



Ofrecemos tres modelos estándar de microscopios que se adaptan a sus necesidades, para el análisis de semen en la granja, el análisis de esperma para su procesamiento en el laboratorio o la realización de controles de calidad sobre las dosis ya procesadas. También podemos personalizar un microscopio para adaptarse a sus necesidades exactas. Por favor, póngase en contacto con su representante de CPC para discutir sus necesidades.

## EVALUACIÓN COMPLETA DE SEMEN CON PLATINA CALENTADORA PARA MICROSCOPIO

Esta es una excelente opción para un laboratorio profesional de análisis de semen. Viene con contraste de fase, un cabezal binocular y la platina calentadora, así como las siguientes características y opciones:

- Sistema de Evaluación de semen completa
- Rango de temperatura de 25-50° C (77-122° F)
- Cabezal binocular o video listo
- Campo claro u opciones de fases completas
- Elección de Achromat, objetivos Semi-plan o el plan
- Halógeno o iluminación LED
- Controlador digital de temperatura
- Koehler diafragma de campo para el control de la iluminación
- USB Digital u opciones de la cámara S-Video

S3-1130 Evaluación de semen con platina calentadora para microscopio

## MICROSCOPIO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASES

Es ideal para el análisis de la morfología y la motilidad del semen en el laboratorio y tiene la siguientes características:

- Cabezal binocular tipo Siedentopf con inclinación a 30 grados, rotación de 360 grados.
- Los oculares 10X con amplio campo y una distancia interpupilar ajustable entre 55-75mm.
- Con objetivos 10XR, 20XR, 40XR y 100XR de contraste de fase y un solo condensador de torreta.
- Incluye un filtro verde y un centrado ocular del telescopio.

S3-1125 Binocular de contraste de fase microscopio

## MICROSCOPIO MONOCULAR

Ideal para el usuario en la granja, para comprobar la motilidad del esperma antes de su uso. Tiene las siguientes características:

- Aumentos: 40X a 1000X
- Condensador Abbe NA 1.25
- Coaxial grueso y fino de enfoque
- Diafragma Iris con portafiltras incluido el filtro azul
- Certificado por la CE
- Aceite de inmersión, cubierta de polvo de vinilo, protectores de goma para los ojos
- Objetivos 4 DIN: 4X (NA 0.10), 10x (NA.25), 40X (N.A. 0,65), 100X (inmersión en aceite, N.A. 1,25)
- 4.50" x 5.0" (120x125mm) estado mecánico con coaxial ajuste de la unidad / de piñón y cremallera, la posición bajo el mando

S3-1120 Microscopio monocular



S3-1120

## LÁMINAS PORTAOBJETOS Y CUBREOBJETOS PARA MICROSCOPIO

Láminas de calidad portaobjetos y cubreobjetos para la evaluación del semen.

- S6-9000 Portaobjetos para microscopio – 72/caja
- S6-9003 Portaobjetos para microscopio – recubierta de cafeína – 72/caja
- S6-9002 Cubreobjetos de 18 mm x 18 mm – 100/caja



S6-9000, S6-9002, S6-9003

## ESPECTROFOTÓMETROS

El espectrofotómetro es una opción rentable para la medición de la concentración de las células de esperma. Cualquier cubeta cuadrada de 10 mm o tubos de vidrio transparente de 12 mm se pueden utilizar.

S2-7000 Espectrofotómetro



S2-7000

## CUBETAS Y TUBOS

Para su uso en espectrofotómetros.

S3-0030 Cubetas cuadradas de 2.5 ml a 4.5 ml - 500/caja

S3-0035 Cubetas cuadradas de 1.5 ml a 3.0 ml - - 500/caja


S3-1360 Tubos de vidrio Pyrex de 12 mm x 75 mm - 250/caja, 1000/cartón.

## LÁMINA HEMOCITÓMETRO

Para el conteo manual de los espermatozoides.

Esta "Improved Neubauer Hemocitómetro" tiene una Profundidad 0.100mm, volumen 0.1 microlitro y 1/400 cuadrícula mm.

S6-1601 Lámina Neubauer hemocitómetro

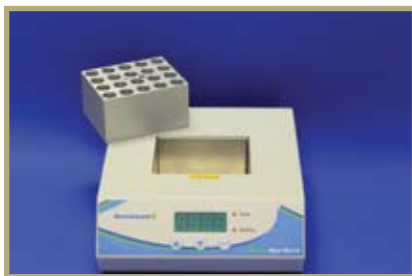

S3-1340

## BLOQUE CALENTADOR DE BAÑO-SECO DIGITAL

Este único bloque calentador es perfecto para calentar muestras para su evaluación.

Es controlado por un microprocesador, es preciso y fácilmente programable. Cuenta con una variedad de bloques intercambiables que están disponibles para dar cabida a diversos tamaños de tubos de muestras.

S3-1340 Bloque Calentador de Baño- Seco Digital

TALLA DE TUBOS	OPCIONES DE BLOQUES CALENTADORES		
	20- Espacios	12- Espacios	6-Espacios
10 mm	S3-1328		
12 mm	S3-1330		
13mm	S3-1332		
15 mm		S3-1322	
16 mm		S3-1324	
17mm		S3-1326	
20 mm			S3-1318
25 mm			S3-1320

## PIPETA DISPENSADORA REPETITIVA

Esta pipeta cuenta con una punta “Combitip” que al llenarse permite dispensar diluyentes repetitivamente sin la necesidad de volver a llenarla. Esta pipeta tiene una pantalla digital, se puede ajustar de 1µl - 10 ml y puede utilizar hasta 9 diferentes Combitips. Pida a un representante de CPC una Combitip para satisfacer sus necesidades específicas.

- S3-1235 Pipeta Eppendorf repetitiva plus
- S3-1225 Eppendorf combitip plus 25 ml – 100/caja
- S3-1230 Eppendorf combitip plus 50 ml – 100/caja

## PIPETAS FIJAS Y AJUSTABLES

Pueden usarse con el Sistema CASA, espectrofotómetros y otros procedimientos de laboratorio.

Pipeta-Volumen fijo	
S3-1240	25µl
S3-1243	50µl
S3-1245	100µl
S3-1248	200µl
S3-1250	500µl
S3-1252	1000µ

Pipeta-Volumen Ajustable	
S3-1255	20µl - 200µl



S3-1255

## PUNTAS DE PIPETA DESECHABLES

	Color	Volumen	Embalaje
S3-1260	Transparente	10µl	1,000/paquete
S3-1265	Amarillas	200µl	1,000/paquete
S3-1270	Azules	1000µl	100/caja, 10 cajas/ cartón

## ESTACIÓN PARA PIPETAS

La estación para pipetas permite guardar hasta cinco pipetas y mantenerlas en posición vertical. Funciona con la mayoría de las pipetas estándar.

- S3-1220 Estación para pipetas universal

## TUBOS Y TAPAS PLÁSTICAS PARA MUESTRAS DE SEMEN

- S3-1300 5ml Tubos para muestras, 12mm x 75mm – transparentes, 1,000/bolsa
- S3-1305 8ml Tubos para muestras, 13mm x 100mm – transparentes, 1,000/bolsa

## TAPAS PARA LOS TUBOS DE MUESTRA

Todas las tapas son empacadas en bolsas de 1000 unidades.


Tapas para tubos de 12 mm (S3-1300)

S3-1302	Transparente
S3-1302RED	Rojo
S3-1302ORG	Anaranjado
S3-1302YEL	Amarillo
S3-1302GRN	Verde
S3-1302BLU	Azul
S3-1302LAV	Morado
S3-1302WHT	Blanco

Tapas para tubos de 13 mm (S3-1305)

S3-1307	Transparente
S3-1307RED	Rojo
S3-1307ORG	Anaranjado
S3-1307YEL	Amarillo
S3-1307GRN	Verde
S3-1307BLU	Azul
S3-1307LAV	Morado
S3-1307WHT	Blanco

## PORCINO

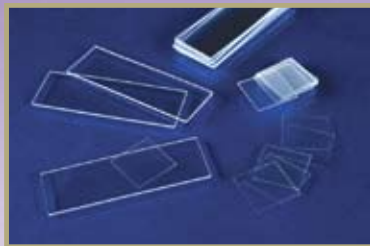

S6-9000, S6-9002



B4-2222, S6-1100, B2-6600



S3-1105



S2-2500



S2-5600

## LÁMINAS PORTAOBJETOS PARA MICROSCOPIO

Son claros, con una dimensión de 3" (7.62 cm) de largo x 1" (2.54 cm) de ancho x 1.0 -1.2 mm de grosor. Vienen 72 unidades por caja y 50 cajas por cartón.

S6-9000 Láminas portaobjetos

## LÁMINAS CUBREOBJETOS DE CRISTAL

Cubreobjetos ideales para microscopio (2.2 cm x 2.2 cm) para uso en laboratorios donde se desea la mejor calidad a los mejores precios. Excelentes para la microscopía rutinaria. Vienen 80 unidades por caja

S6-9002 Cubreobjetos de Cristal

## EQUIPO PARA MUESTREO DE SEMEN

S6-1100 Pipetas de transferencia desechables 9", con bulbo, 400 por caja

S6-1600 Citrato de sodio, 500 g, 6 botellas por caja\* no se muestra

B4-2222 Pajuela para muestreo d semen, 0.50 ml,  
1,000 por bolsa, 10 bolsas por caja

B2-6600 Tubo para centrífuga, 15 mil, desechables, 100 por bolsa\* no se muestra

## TERMÓMETROS

S3-1105 Termómetro digital w/sonda de acero inoxidable - tallo largo

S3-1100 Termómetro de cristal - No mercurio - Centígrados y Fahrenheit -  
12" de longitud

## BALANZA ESPÁTULA DE MANO

Útil para el pesaje del polvo diluyente a la hora de mezclar. Cuenta con una capacidad de 300 g, con incrementos de 0.10 g. La cuchara es desmontable y apta para lavar.

S2-2500 Balanza espátula - incrementos de 0.10 g

## BALANZA DIGITAL PARA EL TANQUE DE DILUYENTE

Esta Balanza tiene una capacidad de 400 libras (180 kg), tiene un control remoto con luz de fondo para facilitar la visualización, 5 botones de teclado en el control remoto que incluye: encendido/apagado, espera, botones de la unidad, de cero y tare. Cuenta con una plataforma de acero inoxidable de 14" x 16" y con incrementos de peso de 0.10 libras (0.050 kg).

S2-5600 Balanza digital - incrementos 50 g - 180 kg

*Tenemos muchas más opciones para balanzas digitales de diferentes capacidades, dimensiones y incrementos de peso. Posibles usos: balanzas para pesar ingredientes a granel, balanzas de precisión para medición de micro-ingredientes, para pesar paquetes de envío, y muchos más. Póngase en contacto con un representante de CPC con sus necesidades específicas.*

## BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA

Esta balanza de precisión de 10 kg es adecuado para laboratorios que necesitan pesar grandes cantidades con precisión.

S2-5400 Balanza de precisión 10 kg - incrementos de 0.10 g



S2-5400

## BALANZAS COMPACTAS ELECTRÓNICAS

Estas balanzas son perfectas para la mayoría de los usos de laboratorio. Opera en incrementos de 1.0 g usando 6 baterías doble "A" o el adaptador de CA suministrado. Las características estas balanzas incluyen: pantalla con retroiluminación automática, una plataforma de acero inoxidable de 7.0" x 6.2", cuatro modos de peso (gramos, onzas, libras, kilogramos) y tecla TARE a cero fuera de un contenedor. Tienen una cubierta de plástico que evita los daños causados por derrames y hace que para una fácil limpieza.

S2-5500 Balanza electrónica 10 kg – incrementos de 1.0 g

S2-5000 Balanza electrónica 6 kg – incrementos de 1.0 g



S2-5500 o S2-5000

## PESAS DE CALIBRACIÓN

Para asegurarse de pesos y procesamientos precisos, las balanzas digitales deberán calibrarse periódicamente.

Estas pesas de calibración de acero se ajustan a la norma ASTM Clase 6 de tolerancia para aplicaciones de uso general. Son adecuados para la calibración de las básculas en mayoría de los laboratorios de AI (Artificial Insemination). No se recomienda estos pesos para pruebas de ensayo y calibración que requieren documentación para cumplir con los requisitos de la ISO. Póngase en contacto con nosotros si necesita pesos de calibración para la certificación.

Pesas de Calibración			
S3-1000	1 kg	S3-1030	100 kg
S3-1010	2 kg	S3-1040	200 kg
S3-1020	5 kg	S3-1050	500 kg



## ULTRASONIDO DE MUÑECA PARA DETECTAR DE EMBARAZO

Diseñado para ser pequeño, ligero y fácil de usar, el ultrasonido de muñeca es una opción asequible para un sencillo diagnóstico de preñez en el ganado porcino en el día 23 de gestación. Se utiliza una sonda abdominal mecánica.

Contiene los siguientes accesorios: una sonda abdominal, una batería recargable con un tiempo de carga útil de 2.5 horas, dos muñequeras y una bolsa de transporte rígida.

Una segunda batería es opcional.

S6-8700 Ultrasonido de muñeca

S6-8710 Sonda de exploración abdominal

S6-8715 Scan batería

S6-8720 Scan correa para la muñeca



## TRAMPA AGARRA FÁCIL EZ-CATCH

De construcción resistente, de diseño único de la caída libre que permite al usuario ajustar rápidamente la trampa con una mano. La trampa EZ-CATCH ofrece seguridad para sostener con una mano la trampa, lo que hace que sea posible dar inyecciones, etiquetar orejas, etc con la otra mano libre.

Hecho en los EE.UU.


Ninguna otra trampa se le puede comparar!

S2-6000 Trampa agarra fácil EZ-Catch



## ALMACENAMIENTO DE VIDA DE FERTIL

Usando FertiLife™, los resultados de fertilidad del número de días de post-colección son comparables con la fertilidad del mismo día de colección del semen, utilizando los parámetros normales de la industria como: calidad de agua, procedimiento de colección, la higiene, el recuento de células de espermatozoides y otros parámetros.

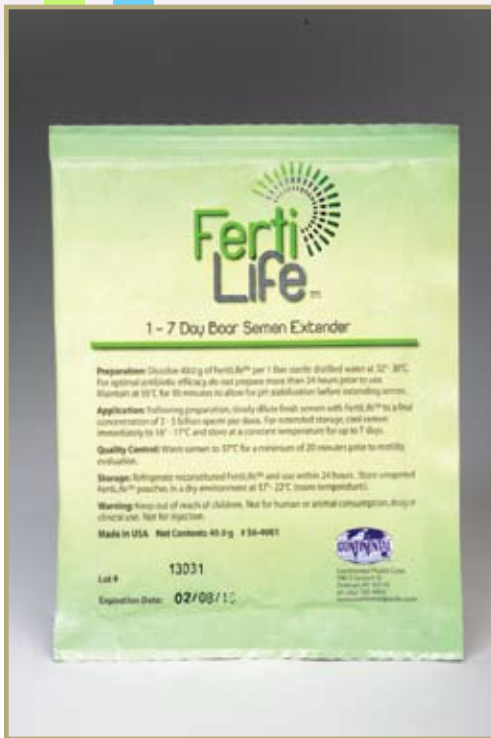

## DILUYENTE PARA SEMEN PORCINO

FertiLife™ es el primero de una nueva generación de diluyentes que se desarrolló mediante la evaluación del potencial de fertilización de los espermatozoides individuales. La investigación ha demostrado que las células incluso con excelente motilidad pueden no ser capaces de fertilizar huevos.

Una nueva técnica ha sido desarrollada la cual permite a las células espermáticas individuales ser monitoreados en el laboratorio durante su almacenamiento en diferentes diluyentes, evaluando su habilidad para ser capacitado y fertilizar los huevos cuantitativamente. Las células de espermatozoides almacenadas en FertiLife™ exceden la capacidad de fertilizar que las células de espermatozoides almacenadas en todos los otros diluyentes.

Más importante aún, las tasas de mayor capacitación de células espermáticas diluidas en FertiLife™ se traduce a una de las mayores tasas de concepciones y el aumento de tamaño de las camadas. Esto ha sido confirmado utilizando datos a nivel de granjas.

Con mayor capacidad de fecundación, FertiLife™ puede permitir a los usuarios disminuir el número de células espermáticas por dosis requerida para la inseminación.

FertiLife™ No contiene ingredientes de origen animal o BSA (albumina de suero bovino), es no irritante y no es espumante.

Los productos Continental distinguen de otros proveedores de diluyentes para la inseminación debido a su enfoque en la fertilización potencial de células de espermáticas individuales, además de los monitoreos tradicionales de la motilidad celular y la morfología.

## IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN

“La capacitación se define como las modificaciones funcionales que hacen al espermatozoide competente para fertilizar un oocito. Las tasas más altas de capacitación de células diluidas en FertiLife™ se traduce en las mayores tasas de concepciones y el aumento del tamaño de las camadas.”

## FERTILIFE™

Conservación a largo plazo: Con un almacenamiento de vida fértil de 7-8 días. Tiempo de almacenamiento máximo de FertiLife™ con una mayor capacidad de fertilización y protección avanzada contra el shock de temperatura. Es ideal para un horario de colección/entrega dos veces por semana. Contiene gentamicina, ampicilina y colistin sulfate. Antibióticos de encargo disponibles.

- S6-4001 FertiLife™ Diluyente para Semen Porcino  
40g (1 litro) - 300 unid/caja
- S6-4003 FertiLife™ Diluyente para Semen Porcino  
120g (3 litros) - 100 unid/caja
- S6-4100 FertiLife™ Diluyente para Semen Porcino  
4 kg (100 litros) - 4 unid/caja



## CPC BTS

Conservación a corto Plazo: Con un almacenamiento de vida fértil de 2-3 días. La formulación BTS estándar probado para los sistemas de producción que utilizan el semen dentro 2-3 días de post-colección. Nuestro 40g por litro de formulación hace que sea fácil para evitar confusiones y los errores de mezcla en el laboratorio cuando se cambia a nuestra fórmula de larga duración. Contiene gentamicina.

- S6-2001 BTS Diluyente para Semen Porcino - 40g (1 Litro) - 300/caja
- S6-2003 BTS Diluyente para Semen Porcino - 120g (3 litros) - 100/caja
- S6-2100 BTS Diluyente para Semen Porcino - 4 kg (100 litros) - 4/caja



## FERTILIFE™ QUICKVIEW

Conservación a largo plazo: Con un almacenamiento de vida fértil de 6-7 días. Diseñado para los sistemas de producción en el análisis rápido de la dilución, se prefiere una muestra de semen con el calentamiento mínimo. Aún así ofrece un buen almacenamiento de vida fértil con una mayor capacitación y avanzada protección contra el shock de temperatura. Ideal para un horario de colección/entrega de 2 a 3 veces por semana. Contiene gentamicina y ampicilina. Antibióticos de encargo disponibles.

- S6-3001 FertiLife™ QuickView Diluyente para Semen Porcino  
40g (1 litro) - 300 unid/caja
- S6-3003 FertiLife™ QuickView Diluyente para Semen Porcino  
120g (3 litros) - 100 unid/caja
- S6-3100 FertiLife™ QuickView Diluyente para Semen Porcino  
4 kg (100 litros) - 4 unid/caja



## PORCINO

### SISTEMA MANUAL PARA LLENAR TUBOS

Para dispensar el semen porcino diluido en botellas o tubos. Depósito Ideal para dispensar semen mezclado. Se usa con una bolsa de dispensación de un galón desechable y un tubo caño dispensador.



- S6-6545 Sistema completo, incluye todas las piezas metálicas vistas en la imagen a la izquierda
- S6-6540 Caja de metal para sostener la bolsa de galón
- S6-6538 Piernas de soporte de la caja y bandeja deslizante
- S6-6535 Tubo caño dispensador
- S6-8236 Gradilla para tubos de semen, tiene 6 tubos

*Los componentes individuales también se pueden comprar por separado*

### BOTELLA DE BOCA ANCHA, BIG MOUTH®

Botella de polietileno extremadamente suave, graduada de 10-90 ml. Las etiquetas y la tinta de marcadores se adhieren. Tapón en dos partes (pico y cuello) forma un sello hermético. El cuello puede volverse a utilizar.

- S6-6500 Botella sin tapa, 250 por caja
- S6-6501 Cuello, 250 por bolsa, 10 bolsas por caja
- S6-6502 Natural - Picos – 250 por bolsa, 10 bolsas por caja
- S6-6400 Cortador



### BOTELLAS - APERTURA STANDARD

Se vende el juego completo - botella de polietileno suave con un pico de torsión, 100 ml.

- S6-6584 Botella y pico, 10 por paquete, 50 paquetes/caja

### SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ENVASAR SEMEN EN TUBOS

Un nuevo rápido, eficiente, confiable máquina de envasar semen, totalmente automático diseñado exclusivamente para Continental Plastic. Utilizando nuestra tecnología patentada Eco-Tip™ tubos para semen, esta máquina ofrece las siguientes características:

- Funcionamiento eléctrico - NO COMPRESOR DE AIRE REQUERIDO
- Precio económico
- Sistema de control con pantalla táctil
- Con una velocidad de funcionamiento de alrededor de 600 dosis por hora
- Código de Barras
- Disponible con tecnología "Print-On" o con etiquetas

- S7-8000 Sistema Automatizado para Envasar Semen

### SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ENVASAR SEMEN EN BOLSAS

- Capacidad operativa hasta para 800 dosis por hora
- Código de barras de lectura y escritura
- Ethernet de conectividad para el diagnóstico a distancia
- Aplica una etiqueta impresa para cada dosis de semen

- S7-7000 Sistema Automatizado para Envasar Semen en Bolsas



## ECO-TIP™ TUBOS PARA SEMEN

El tubo de semen Eco-Tip™ cuenta con una punta giratoria que permanece unido al tubo después de la apertura. Este diseño patentado ayuda a reducir la cantidad de residuos plásticos que cae en las fosas de estiércol y lagunas, es más amigable con el medio ambiente.

2000 tubos por caja, 14 cajas por tarima.

S6-8252CLR - Claro

S6-8252GRN - Verde

S6-8252RED - Rojo

S6-8252ORG - Anaranjado

S6-8252YEL - Amarillo

S6-8252BLUE - Azul

S6-8252PUR - Púrpura



## ECO-TIP™ Bolsas PARA SEMEN

Con nuestro diseño Eco-Tip™ patentado, las bolsas de Continental™ Eco-Tip™ para semen es la elección correcta para aquellos sistemas que prefieren envases de bolsa. Compatible con la mayoría de los sistemas de bolsas de envasado existentes, las bolsas de Eco-Tip™ para semen, tiene una largo pico cónico con fuerte capacidad para la mayoría de los catéteres estándar. La punta twist-off también puede volver a colocarse si una muestra se ha tomado de la bolsa para el análisis.

Tiene una presentación de 750 por rollo, 2 rollos por caja, 30 cajas por tarima.

S6-8500



## SELLADOR MAGNÉTICO PARA TUBOS DE SEMEN

Sella 6 tubos en un anaquel de acero inoxidable (vea la fotografía).

No requiere compresor de aire para funcionar.

S6-8264 Sellador Magnético de tubos de semen

S6-8236 Anaquel para tubos, sostiene 6 tubos, vendido individualmente



# PORCINO

## CONSERVADORES PARA SEMEN PORCINO CONTINENTAL™



- Proporciona una temperatura uniforme
- Circulación de aire continuo
- Diseñado para proporcionar capacidades tanto de calefacción y refrigeración
- Precisión controlada exactitud de  $\pm 0.50^{\circ} \text{C}$
- Pre-programado para una temperatura de  $17^{\circ} \text{C}$
- La función de Temp-Lock evita el acceso no deseado

- S6-0017 Unidad de almacenamiento semen - 1.7 pies cúbicos (50 dosis)  
S6-0025 Unidad de almacenamiento semen - 2.5 pies cúbicos (100 dosis)  
S6-0044 Unidad de almacenamiento semen - 4.4 pies cúbicos (225 dosis)  
sondas duales de temperatura y ventiladores  
S6-0110 Unidad de almacenamiento semen - 11.0 pies cúbicos (500 dosis)

Pregunte a un representante de CPC sobre refrigeradores de tamaño personalizado.



S3-1010

## USB LECTOR Y REGISTRADOR DE TEMPERATURA DIRECTO

Con un rango de medición de  $-35$  a  $80^{\circ} \text{C}$  ( $-31$  a  $176^{\circ} \text{F}$ ).

El USB-1 registrador de datos puede almacenar más de 16.000 lecturas y funciona con una batería de litio de larga vida reemplazable, lo que permite que la unidad de registro de datos sea continua durante al menos un año. El registrador cuenta con un software para facilitar la configuración de sus datos. Los parámetros seleccionables son: la tasa de registro, las unidades de medida, alta y baja alarmas y hora de inicio.

S3-7010 Lector de temperatura con interfaz USB y software

## THERMO-SPERMC21™

La bolsa Thermo-SpermC21™ revolucionará el modo de transportar semen. La bolsa regula la temperatura de los tubos de semen por encima de 15 grados y debajo de 25 grados Celcius dentro de la caja de envío durante la transportación. El semen será protegido de imprevistos cambios de temperatura. La bolsa Thermo-SpermC21™ pesa menos de la mitad de la tradicional bolsa con gel, ahorrando dinero durante los envíos de semen.

S6-0100 Thermo-SpermC21™, 100 bolsas por caja



S6-0100

## BOLSAS PARA TRANSPORTE

Diseñadas especialmente para empacar tubos de semen. El color obscuro no permite el paso de la luz UV. Se venden 300 por caja.

NEGRA – DE 4 MIL DE GRUESO

S6-6621 5 litros, 12" de ancho x 20" de largo (30.48 cm x 50.80 cm)

S6-6623 9 litros, 16" de ancho x 20" de largo (40.64 cm x 50.80 cm)

S6-6622 13 litros, 23" de ancho x 20" de largo (58.42 cm x 50.80 cm)



## MARCADOR PLATEADO WRITE-ON™ PEN

Nunca pierda de vista la información de entrega! Puede escribir al cliente la información y el número dosis directamente en sus bolsas de transporte de color negro.

O4-2100SIL Write-On™ Pen, para las bolsas de transporte negro.



## CATÉTERES

Diseñados para la funcionalidad y el rendimiento, nuestros catéteres de inseminación ofrecen una amplia gama de opciones. Todos nuestros catéteres tienen una longitud estándar de 22" y están fabricados a precisión con dimensiones internas y externas para asegurar un buen ajuste con casi todos los envases para semen.



## CATETERES DE ESPUMA

La espuma suave facilita la introducción

al tracto reproductor con mínimo riesgo de entrar a la uretra. La espuma suave permite un excelente candelado en el cérvix. El tubo se encuentra dentro de la espuma para proteger las membranas mucosas.

Vienen 500 catéteres por caja


<b>S6-5125</b>	CLASSIC BLUE™	<b>S6-5158</b>	CLASSIC BLUE™ con agarradera
<b>S6-5122</b>	COMPLETE BLUE™	<b>S6-5153</b>	COMPLETE BLUE™ con agarradera

## CATÉTER INTRAUTERINO

Estos catéteres intrauterinos están diseñados para su uso con cualquiera de nuestros catéteres con punta de espuma. La punta del catéter de espuma se inserta primero, seguido por la inserción del catéter intrauterino en el interior del tubo del catéter de espuma. Permita que la cerda relaje su cervix antes de intentar insertar el catéter intrauterino.

Empaquetado en bolsas de cinco catéteres.

<b>S6-5610</b>	Catéter intrauterino, 5/paquete
<b>S6-5620</b>	Catéter intrauterino con COMPLETE BLUE™, 25/paquete

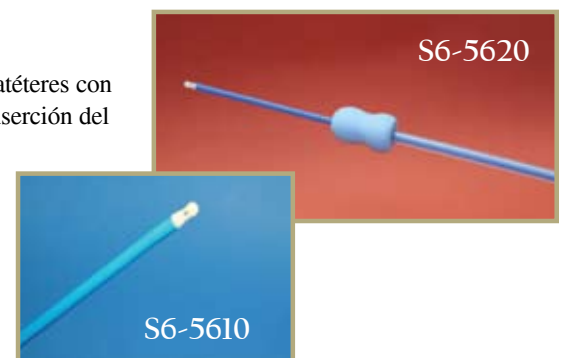

## CATETER BLANCO EN ESPIRAL DE PUNTA DURA

Una punta moldeada tipo Melrose permite la introducción del catéter sin daño al aparato reproductor. La punta de espiral está hecha de hule termoplástico de alta calidad.

Vienen 500 catéteres por caja.

<b>S6-5118</b>	Catéter blanco en espiral de punta dura, 22" de longitud, sin agarradera
<b>S6-5155</b>	Catéter blanco en espiral de punta dura, 22" de longitud, con agarradera

## AGARRADERAS PARA CATETER

Caben en todos los catéteres de espiral y espuma. 25 por bolsa.

<b>S6-5116</b>	Agarraderas para catéter
----------------	--------------------------



PROUDLY BASED IN  
**WISCONSIN**  
U • S • A

## **Continental Plastic Corp.**

540 South Second Street

PO Box 902

Delavan, WI 53115

Phone: 877.728.4911 or 262.728.4800

Fax: 888.775.4810 or 262.728.4810

[info@continentalplastic.com](mailto:info@continentalplastic.com)

[www.continentalplastic.com](http://www.continentalplastic.com)

